


# UV disinfection Storage Cart


## 放射線治療室専用収納カートシリーズ 除菌カート

QSC-020


「紫外線で除菌します」 固定シェルの除菌に最適です。

- ・タイマー設定と開始スイッチだけで簡単に操作できます。
- ・点灯中でも扉を開くと消灯する安全設計です。

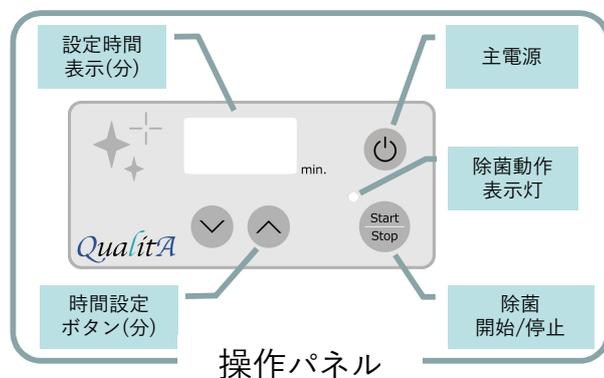


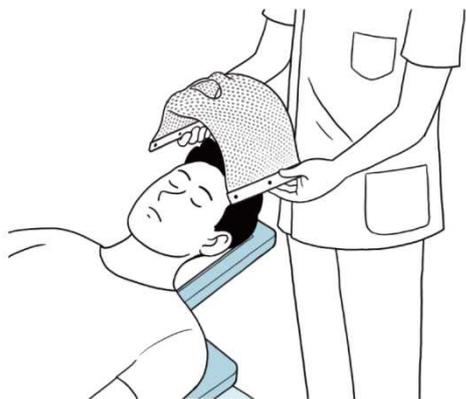


① 患者様からシェルを外す

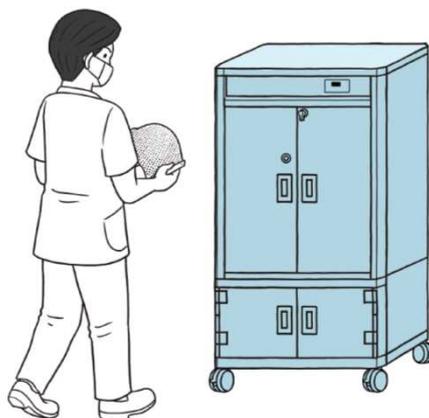

② 除菌カートへ

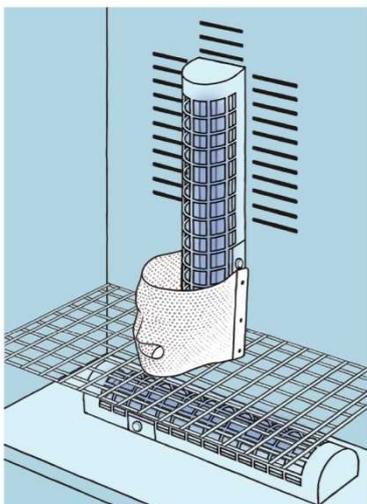

③ 紫外線除菌で1分

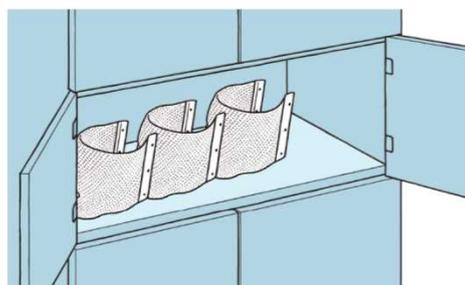

④ 除菌したものを保管庫へ

## 仕 様

主材料 : ステンレス鋼板

寸 法 : 810mm(W) × 475mm(D) × 1440mm(H) 重量約80kg

除菌庫内有効サイズ

: 808mm(W) × 415mm(D) × 600mm(H)

※開口有効幅: 660mm(W)

定格電源 : AC100V(50/60Hz手動切替)

消費電力 : 45W

使用光源 : 紫外線殺菌灯GL15 (JIS規格 C7605) 2灯

照射距離 : 成形済みシェルに対して、概ね30cm以内

照射時間 : タイマー設定 (1分単位)

殺菌効果 : 東芝ライテック株式会社/施設・屋外照明カタログ2020~2021

「殺菌灯について」をご参照ください。

改良のため予告無く仕様を変更する場合があります。

製造

クオリタ  
Qualita

有限会社クオリタ

東日本営業所

〒362-0032

埼玉県上尾市日の出2-2-1

TEL 048-779-7765

FAX 048-779-7766

<https://qualita-works.co.jp>

販売

Catalog Ver. 202404